

必康美德

Oxiline 移动智能制氧站





值得信赖的行业专家

必康美德是专注医用气体管道系统的设计、供应和安装的专业供应商。我们的产品和服务在全球各地的医院中发挥着重要作用,为患者的治疗保驾护航。



必康美德承诺:


- 提供专业服务
- 持续创新
- 供应高质产品
- 产品设计以患者和医护人员为优先
- 提供灵活和定制化的优质解决方案

我们的方案

我们的产品遍布医院的每个角落。

我们必康美德为医院提供医用气体的整体解决方案。相应地,为满足顾客不同需求,我们提供一系列现成的和定制化的服务包。

- 在机房,我们提供医疗空气,医用真空,医用制氧机和汇流排;
- 在护士站,我们设置区域阀门箱和区域报警器,帮助护士确保随时为病人供气;
- 在重症监护室和手术室,我们有吊塔系统、区域阀门箱和气体二次产品;
- 在病房,我们提供设备带,终端以及气体二次产品;
- 在维修办公室,我们提供安装气源报警器的监控设备。

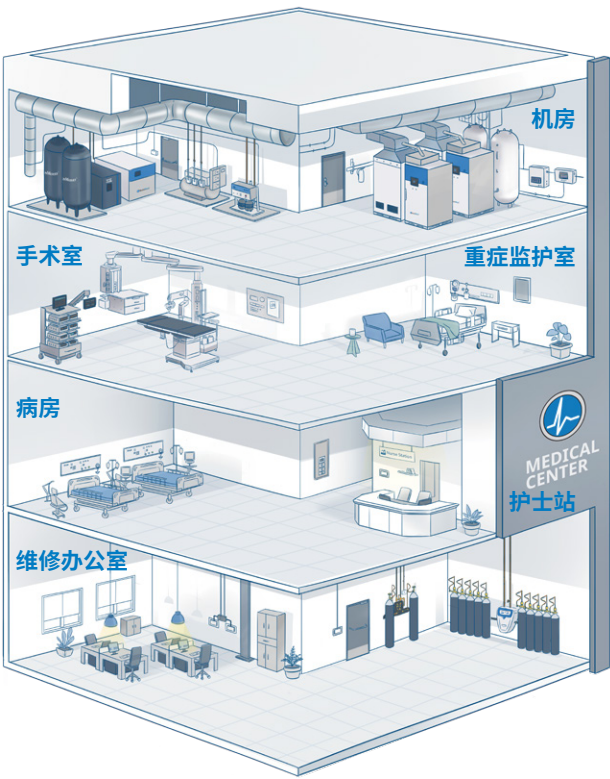

我们的宗旨: 始终为患者提供供应

我们关注完整的客户业务过程,以最大限度地创造价值

- 基于客户需求进行技术参数以及文档准备
- 进行投标以及和供应讨论订单并且进行采购
- 安装施工阶段,进行安装、施工、验证
- 医用系统使用运行期间,对系统运行进行监测
- 提供维修维保服务
- 通过培训、监测和合规审查进行定期验证
- 医用系统使用出现问题时,进行升级/更新,或者对产品进行报废



Oxiline

移动智能制氧站



高集成化多级过滤
多级超精过滤保证气体洁净



永磁变频电机
V系列采用永磁变频电机，传动系数高，效率高，无需更换皮带



高品质氧气
供应符合国家药品监管局规定的93 氧



一体式设计
高度集成设计，尺寸紧凑，便于安装，相关性能已通过工厂测试和验证，保障产品质量



智能控制系统
可远程监控，配有数字触摸操作界面，方便用户全面了解机组工作情况等信息



高品质分子筛
高品质分子筛确保机器工作效率和延长机器寿命

Oxiline

移动智能制氧站



制氧无边界


标准集装箱尺寸，灵活运输，高山也可抵达。
插电即用，无需其他，地面制氧随时随地。
零污染排出，环境保护毫不费力。

科学设计

专业布局：内部管道专业布局，减少管道内部能量损耗
插电供氧：插电即可获得93±3%医用氧
超精过滤：多级超精过滤保证气体洁净
散热风道：独立散热通风管道、不需单独排氮风机
检修设置：人性化预置检修门/窗口，轻松安检维护
户外专用漆：符合标准型HG/T2454-2014 II 型外用


定制专用箱体

三层防护，坚固盔甲

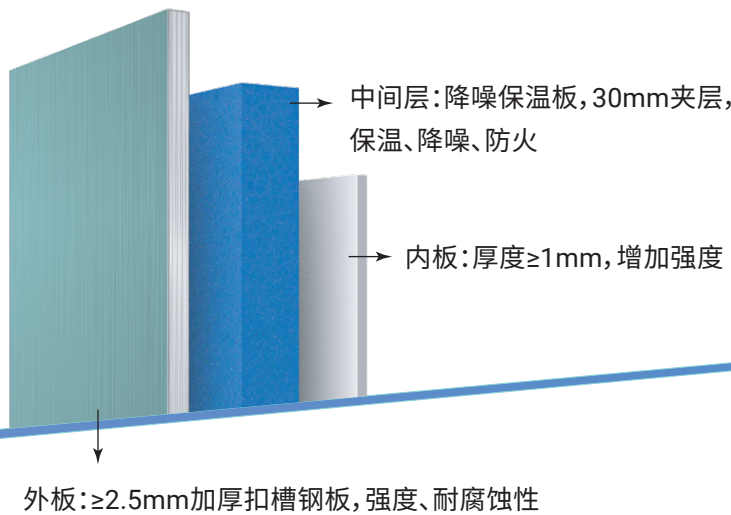

散热管道

独立散热通风管道
不需要单独排氮风机

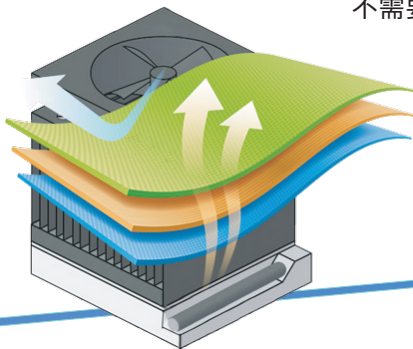

强制排风风扇，总控台控制开启，增加内部散热通风换气量





产品参数

20 尺标准集装箱

总产氧量	医用一体式制氧系统		
	型号	单台功率	数量
		KW	
m³/h			
15	MD-600	22	1
20	MD-800	26	1
25	MD-900	30	1
30	MD-1000	37	1

40 尺标准集装箱

40	MD-2000	55	1
50	MD-3000	75	1
60	MD-5000	90	1
70	MD-1500	90	2
80	MD-2000	110	2
100	MD-3000	150	2
120	MD-5000	180	2

注：
1. 以上参数仅供参考，可根据需求，客户化定制产品；
2. 备用氧气汇流排为可选项



细微之处 呵护生命!

